


Guía de
usuario:

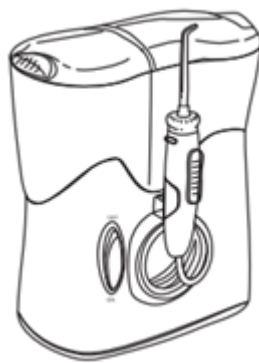

h2ofloss

Irrigador oral y nasal

Modelo: hf-8 Mudo

¡Importante!
Lea
atentamente
este manual y
guárdelo para
las consultas
futuras.



Congratulaciones

Felicitaciones por la compra de la Máquina de limpieza dental de h2ofloss(Irrigador oral).

Este producto toma mucha tecnología incluido la presión y el pulso.

Este producto puede eliminar eficazmente el residuo de los alimentos y las bacterias de las hendiduras bajo los dientes y los escombros.

También puede eliminar eficazmente las basuras, los virus y los alérgenos de las hendiduras de la cavidad nasal y los senos paranasales.

Lea con atención este manual para conocer el uso más detallado.

Catálogo

| | | |
|-----------------------------|-------|------|
| Precauciones de seguridad | ----- | 4-5 |
| Introducciones del producto | ----- | 6 |
| Cómo usarlo | ----- | 7-12 |
| Mantenimiento del producto | ----- | 12 |
| Solución de problemas | ----- | 13 |
| Servicio después de venta | ----- | 14 |

Precauciones de seguridad

Al usar este producto, especialmente hay niños allí debe tomar las siguientes precauciones básicas de seguridad.

Lea todas las instrucciones antes de usarlo.

Peligroso:

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, tenga en cuenta lo siguiente:

- Desconecte el enchufe de alimentación después de usarlo.
- No enchufe el conector del cargador con las manos mojadas.
- No ponga este producto en fácilmente caer o ser empujado en una bañera, baño o las áreas de lavabo.
- No use cuando se ducha.
- No sumerja en agua u otros líquidos.
- Si el producto se cae en el agua u otros líquidos, desconecte el enchufe de la alimentación inmediatamente, no lo toque.

No importa si está antes de usar este producto o está usando este producto, siempre debe comprobar si hay daños en el cable de alimentación.

Advertencia:

Para disminuir el riesgo de quemaduras, choque eléctrico, incendios o daños a la lesión tisular, tenga en cuenta lo siguiente:

- No use este producto en las siguientes condiciones: el cable de alimentación o el enchufe están dañados, el producto no está funcionando correctamente, el producto se cae o se cae en ningún líquido. Sobre este caso, deben devolver este producto al centro de servicio autorizado o Nuestra Empresa.
- Para el uso de los niños o de las personas que tienen necesidades especiales, deben dar la íntima orientación y supervisión.
- El cable y enchufe del cargador deben estar alejados de superficie caliente.
- No use este producto en las áreas de oxígeno o aerosol de las pulverizaciones.
- No use al aire libre.

Preste atención al usar este producto:


- No ponga agua en las zonas sensibles como la sublingual, las orejas. La presión generada por este producto un poco grande, puede causar graves daños a estas partes.
- Consulte la "Guía de uso" para conocer el uso correcto.
- Use este producto según estas instrucciones o las sugerencias profesionales.
- Cuando usa este producto no puede tener más de 8 minutos por cada dos horas.
- Sólo se puede usar la boquilla u otros accesorios recomendada por nuestra empresa. (Incluido la boquilla, boquilla de bolsas periodontales, limpiador de lengua, boquilla de limpiar, boquilla de lavar la nariz, boquilla especial de ortodoncia)
- Nunca desmonte la cabeza flexible de plástico de la bolsa periodontal. Si la cabeza de plástico suelta por cualquier razón, por favor deseche la cabeza de plástico y el

eje transparente, y reemplace con una nueva boquilla de bolsa periodontal.

- Sólo se puede poner agua u otros líquidos recomendados en el tanque.
- No ponga o inserte objetos extraños en ninguna abertura o manguera.
- No lleve cualquieres adornos de dientes o de nariz al usarlo. Si los lleva, los quita antes de usarlo
- No use si la lengua tiene lesión traumática.
- Si el médico o cardiólogo le recomienda que tome antibióticos antes del tratamiento dental, debe consultar a su dentista antes de usar este producto.

Por favor tenga en cuenta las instrucciones anteriores

FEATURES

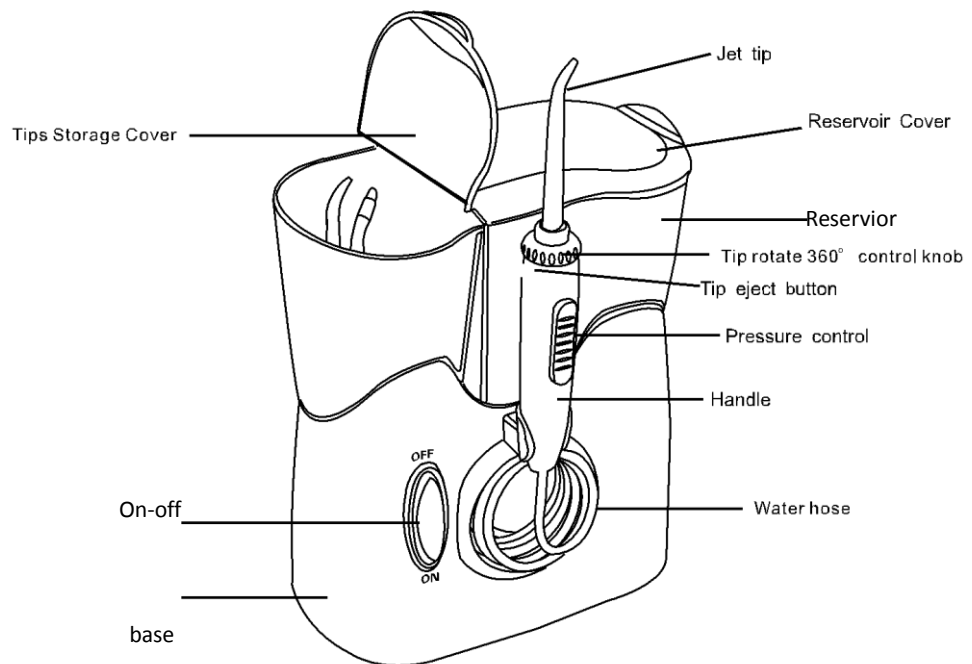

Introducciones del producto

Tip storage cover: Caja de almacenamiento de la boquilla

On-off: Interruptor

Base: Base

Jet tip: Boquilla

Reservoir cover: Tapón del tanque

Reservoir (800ML) : Tanque

Tip rotate 360° control knob: 360° perilla de control de la dirección de flujo

Tip eject button: Botón de expulsión de la boquilla


Pressure control: Botón de la presión

Handle: Mango

Water hose: Manguera




Tongue
Cleaner
Tip

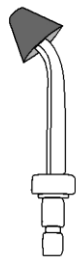

Standard Nasal
Irrigation Tip




Moisturizing
Mist Spray
Nasal Tip

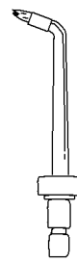

Orthodontic
Tip



Periodontal
Tip

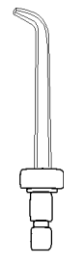

Jet Tip

Tongue cleaner tip: Limpiador de lengua

Standard nasal irrigation tip: Boquilla de lavado nasal a columna de agua

Moisturizing mist spray nasal tip: Boquilla de lavado nasal de pulverización

Orthodontic tip: Boquilla especial de ortodoncia


Periodontal tip: Boquilla de bolsas periodontales

Jet tip: Boquilla estándar

Plug this device into voltage system that is specified on the device. If the outlet is controlled by a wall switch, be sure it is turned on.


Tip Storage

The tip storage comes with two movable tips dividers. The holding capacity of tips is enlarged by removing the dividers. Max: 20 tips.

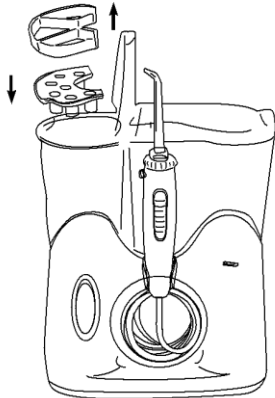

Preparing the Reservoir

Open the reservoir cover. Lift off the water reservoir from the base and fill with lukewarm water. Place the reservoir securely over the base and press down firmly. Put down the reservoir cover.

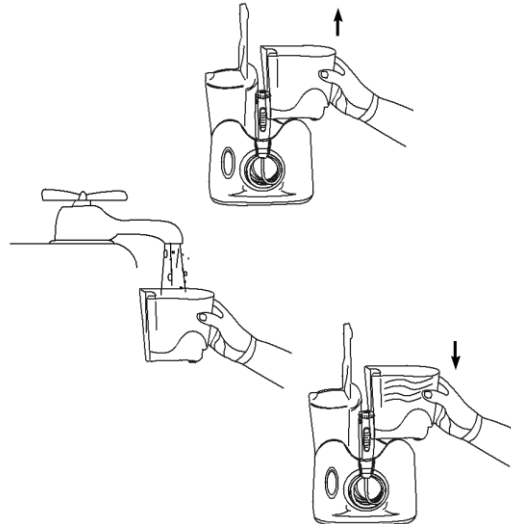

Cómo usarlo

Inserte el cable en el enchufe. Si el enchufe es controlado por el interruptor de pared, asegúrese de que el interruptor de pared esté encendido.


Caja de almacenamiento de la boquilla

La caja de almacenamiento de la boquilla tiene dos móviles enchufe de boquilla y bastidor de capa. El enchufe de boquilla puede arreglar las boquillas, y el bastidor puede permitir a la familia para distinguir el área de boquilla respectiva.

Los usuarios también pueden no utilizar el enchufe de boquilla y el bastidor de capa, así la caja de almacenamiento puede almacenar más boquillas.

Prepare el tanque

Abra la tapa del tanque, retire el tanque, llénelo de agua en el tanque. Ponga el tanque en la base, presione firmemente hacia abajo. Ponga la tapa del tanque.

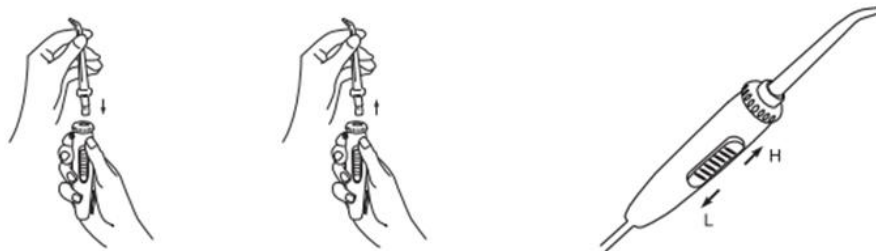


Inserte y retire de la boquilla

Inserte la boquilla en el mango, cuando fija la boquilla, el anillo colorido de la boquilla debe estar al ras con el tope del botón de la asa. Pulse el botón de expulsión de la boquilla para quitarla.

Ajuste la configuración de presión


Deslice el botón de presión del mango para controlar el flujo de presión. Cuando pulse hacia la dirección de la boquilla, aumenta la presión de agua. Cuando pulse hacia la dirección de agua, debilita la presión de agua.

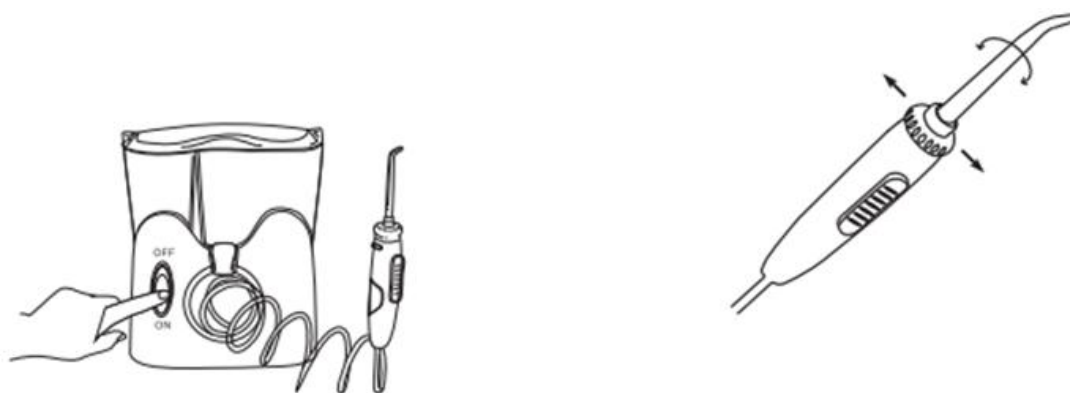

Pone en la boca

Se inclina sobre el lavabo, pone la boquilla en la boca, alinee los dientes. Enciende el interruptor de la base con otra mano. Desliza el botón de presión para ajustar la presión del agua.

Controla la dirección del flujo mediante girar la perilla en la parte superior del mango.

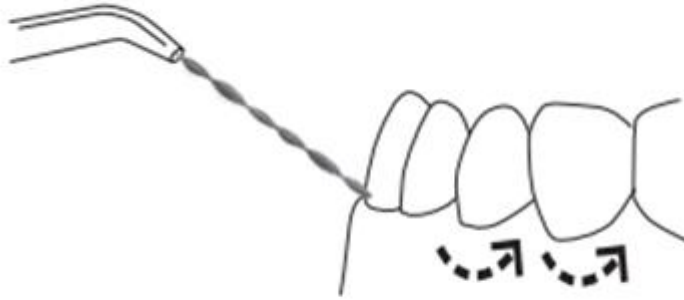

Tecnología recomendada

Dejar que el chorro de agua con la línea de las encías en un ángulo de 90 grados. Hacer que los labios sean cerrados o semi-abiertos para evitar que no influya la pulverización catódica, deber dejar al agua en la boca fluya libremente sobre el lavabo (como cepillarse los dientes). Para obtener los mejores resultados comience la limpieza con muelas (los dientes posteriores) hacia la dirección del incisivo. Dejar que el cabezal de inyección deslice a lo largo de la línea de las encías y hace una parada corta entre los dientes. Hasta que limpien todo alrededor de las encías y entre los dientes.

Después de terminarlo

Cerrar el interruptor. Desechar el líquido que queda en el tanque, desconectar el enchufe de alimentación.




Boquilla Especial

Boquilla de bolsas periodontales

La boquilla de bolsas periodontales puede limpiar los dientes y las partes difíciles de acceso mediante poner agua en ellos. También se puede llevar el líquido antibacteriano en las partes de periodontitis, por favor use el líquido antibacteriano recomendado por los médicos. Por favor se incline sobre la parte superior del lavabo cuando usa la boquilla de bolsa periodontal, y hace que el cabezal suave contra al diente y con un ángulo de 45 grados, luego ponga suavemente la boquilla bajo el tanque de presión de línea de las encías. Abre el dispositivo y configura en la presión más baja, ponga ligeramente la boquilla sobre los dientes, y la limpia a lo largo de la dirección de la línea de las encías. Continúa moviéndose a lo largo de la línea de las encías.

Limpiador de lengua


Se inclina sobre el lavabo. Pone el limpiador de lengua en la lengua, luego acciona el interruptor de la máquina- En primer lugar utiliza la presión más baja, y luego aumenta la presión según el nivel de comodidad. Pone suavemente el limpiador de lengua en el medio de la parte posterior de lengua, a continuación, tire de él con cuidado hacia adelante contra la lengua.

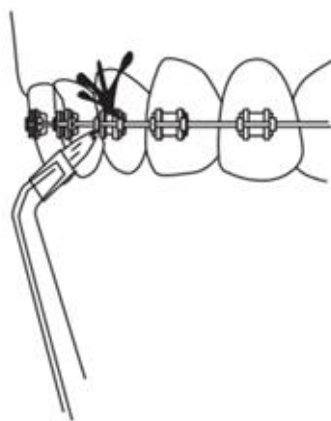

Boquilla especial de ortodoncia

Se aplica a la limpieza de las partes difíciles de acceso como los brackets dentales, ortodoncias y sus alrededores.

Cuando se la utiliza, limpia los brackets dentales, ortodoncias y brecha de dientes con la boquilla especial de ortodoncia, complementados por chorro de agua.

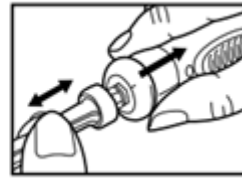

Sistema de limpieza nasal

Nota especial:

1. Para los enfermos graves, por favor consulten a los médicos antes de usar el limpiador nasal.
2. Si los ambos fosas nasales son obstruidos completamente, se prohíbe usarlo.
3. Los niños deben usarlo bajo la supervisión de los padres.
4. Deben quitar la joyería de nariz antes de usarlo.
5. No use fuerza excesiva, la acción debe ser suave.
6. No use las gotas nasales excesivas.
7. La sequedad excesiva del aire y las tormentas de arena perjudican a sus fosas nasales, es necesario limpiarlos antes de dormirse.
8. No use otros accesorios después de los productos de nuestra empresa.
9. No use este dispositivo nasal en otra parte del cuerpo.

Pasos

1. Instala la boquilla nasal en el mango del limpiador de nariz de h2ofloss, y ajusta la presión del agua al mínimo.
2. Vierte el agua tibia en el tanque, el agua que se usa para la limpieza nasal debe añadir la cantidad adecuada de sal y bicarbonato de sodio. La proporción de agua de tibia y líquido es: 1000ml de agua de tibia + 7 gramos de sal + 3 gramos de bicarbonato de sodio, se puede usar con todo 10 gramos de sal sin bicarbonato de sodio, el propósito del uso de salmuera es que el líquido de fosa nasal de gente es muy similar a la salmuera, se sentirá cómodo cuando usa la salmuera.
3. Ajusta la perilla del mango al mínimo, pone la boquilla nasal hacia arriba, enciende el interruptor, deja la boquilla de chorro de agua de no más de aproximadamente 1 pulgada(25mm).
4. Apaga el interruptor, obstruye un lado de nariz suavemente con el cabezal nasal, inclinando la cabeza, mientras que abriendo la boca, para la gente que utiliza por primera vez, debe utilizar el nivel mínimo, y puede aumentar gradualmente la escala

hasta que esté acostumbrado, hasta un nivel máximo.

5. Enciende el interruptor, la solución de sal entra en el lado de la nariz, y sale de otro lado de nariz.

6. No haga la acción de trago cuando limpia la nariz, hasta que fluya hacia fuera el líquido limpio.

7. Ajusta al nivel mínimo cuando queda una mitad de agua en el tanque, obstruye suavemente el otro lado de nariz con el cabezal nasal, repite de nuevo, lo limpie.

8. Ajusta la presión de agua al máximo, limpia la solución salina dentro de la máquina con agua.

9. Después de lavar la nariz, incline la cabeza a un lado, mientras que respira con la nariz, y incline la cabeza al otro lado, después hace la misma acción, dobla la cabeza hacia abajo, luego respira, que el propósito es fluir hacia fuera la solución nasal que permanece en la nariz, porque el interior de la estructura de nariz es muy compleja, se quedará la solución nasal en la cavidad nasal después de lavarla, a las pocas horas después de que la solución fluya hacia fuera es normal, no hay que preocuparse.

Ventajas:

1. La limpieza pulsada puede ser muy eficaz en la eliminación de mucosidad y secreciones dentro de la cavidad nasal, tiene un buen efecto para eliminar todo tipo de virus del resfriado y alergias, también tiene un buen efecto para la convección de nariz y sinusitis.

2. La limpieza nasal también puede promover los pelos de nariz a normal.

3. La limpieza nasal puede hacer que las personas demasiado alcohol mantenga las vías respiratorias permeabilidad.

Mantenimiento del producto

Cuando este producto necesita limpiar, debe limpiarlo con el paño suave o un detergente neutro sin desgaste. Por favor desconecte el enchufe macho del enchufe de alimentación.

Retire el tanque y funcione la máquina hasta que no haya ningún residuo.

Los usuarios no pueden mantener y reparar cualquier pieza eléctrica de este producto por sí propio, ni hacer ningún tipo de mantenimiento de rutina. El mantenimiento de este producto sólo por la empresa o el centro de servicio autorizado para completar. Una boquilla sustituta / Anexo puede consultar a su distribuidor local, o póngase en contacto directamente con la compañía.

Solución de problemas

| Problema | Causa | Solución |
|--|--|--|
| Las fugas entre la boquilla y la perilla del mango | No se muerde la boquilla completamente | Retire la boquilla, y luego volver a instalarlo. |
| El cabezal blando de bolsas periodontales hay dehiscencia | Desgaste grave en la boquilla. | La sustitución de la boquilla. |
| Se produce las fugas de base con la manguera conectada al mango. | El daño de la manguera. | Póngase en contacto con la compañía o agencia, reemplace la manguera. |
| Las fugas del tanque. | No se instala la válvula del almacenamiento del tanque, o se instala al revés la válvula del tanque(La cara fachada hacia abajo) | Instala la válvula del tanque, hace la cara fachada de la válvula hacia arriba. |
| La presión no es suficiente. | La ubicación inadecuada de la instalación del tanque. | Volver a instalar el tanque, y presione firmemente el tanque. |
| El dispositivo no se puede iniciar. | El motor no está en marcha. | Garantiza que la salida pueda funcionar correctamente: comprueba con otros equipos(comprueba el botón de reinicio eléctrica y / o interruptor de pared). |

Servicio después de venta

Tenga en cuenta las siguientes reglas de servicio:

1. Desde que usted compra dentro de los siete días, puede devolver el producto de forma gratuita.
2. Desde que usted compra dentro de un mes, si hay problemas de calidad, puede cambiar de un nuevo de forma gratuita.
3. Desde que usted compra dentro de los dos años, disfruta del mantenimiento gratuito. Los costos de envío pagados por nuestra empresa.
4. Desde que usted compra por más de dos años, disfruta del mantenimiento gratuito. Los costos de envío pagados por el cliente.

Anteriormente no incluyen: daños causados por daños humanos, abusos, mal uso, ni tampoco incluye la boquilla, cepillo y otros consumibles. Las medidas anteriores sólo en la China continental. Otros países y regiones de acuerdo con la ley diferente, los usuarios disfrutan de diferentes derechos.

Teléfono después de venta: 400—833—1118

h2ofloss

Fabricante: Shenzhen Bao Fengtong Empresa de Industria El éctrica de
Responsabilidad Limitada

Hecho en China
Impreso en China

[Http://www.h2ofloss.net](http://www.h2ofloss.net).

Any questions, please contact Email: janet.lai@hotmail.com

