


Anweisung

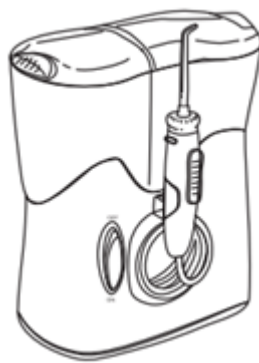

h2ofloss

Munddusche (Mundreinigung)

Modell: hf-8 wispern

wichtig!
Lesen Sie die
Anweisung
vorsichtig und
behalten Sie
für Zukunft.



Vorwort

Herzlich Glueckwunsch zum Beschaffen h2ofloss Munddusche(Mundreinigung)

Das Produkt benutzt mehr Technik inklusiv Wasserdruck und Impuls.

Verwendung mit dem Produkt koennen Sie effektiv den Essrueckstand und Schadbakterien inzwischen die Zaehne und unten Zahnfleisch beseitigen.

Durch die Verwendung koennen Sie auch die Abfaelle, Schadvirus und Allergiestoff in der Nase beseitigen.

Bitte lesen Sie die Anweisung, um detaillierte Info zu kriegen.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise-----	4
Produktvorstellung-----	5-6
Wie benutzt man -----	6-11
Wartung -----	11
Stoerungbehebung -----	12
Kundendienst -----	13

Sicherheitshinweise

Gefahr:

Um die Elektrocutionsgefahr auf minimum zu reduzieren, bitten achten Sie folgend darauf:

- Ziehen Sie den Stecker nicht mit feuchte Haende ein und aus.
- Legen Sie das Produkt nicht ins Wasser oder andere Fluessigkeiten.
- Vor jeder Verwendung der Aufladung pruefen Sie, ob das Kabel kaputt ist.
- Verwenden Sie nicht beim Duschen und Baden
- Legen Sie das Produkt nicht in die Stelle, wo leicht hinfaellet oder in die Badewanne faellt.
- Falls faellt das Produkt ins Wasser oder andere Fluessigkeiten, ziehen Sie sofort den Stecker aus und beruehren Sie nicht.

Warnung:


Um Gefahr zu reduzieren, bitte achten Sie folgend drauf;

- Verwenden Sie das Produkt nicht unten solchen Faelle: Kabel oder Stecker ist kaputt, Produkt arbeitet nicht in Ordnung, Produkt ist hingefallen und kaputt, Produkt faellt in irgendwelche Fluessigkeit. Sie sollen das Produkt zu beauftragte Servicezentrum oder unsere Firma zurueckbringen.
- Kinder oder Menschen mit Sonderbedarf sollen unten Anweisung und Kontrolle das Produkt benutzen.
- Kabel und Steckerdes Ladegeraet sollen fern die warme Oberflaeche.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Umgebung, wo Sauerstoff oder Gasspueranlage gibt.

besondere Achtung:

- Bringen Sie Wasser nicht unten Zunge, Ohren und andere empfindliche Stelle. Das Produkt bringt grossen Druck und evtl. Schaden auf solche Stelle. Bitte Verwenden Sie nach Anweisung.
- Verwenden Sie das Produkt nach dieser Anweisung oder Vorschlag von Fachleute.
- Sie duerfen nur die die Ersatzteile von unserer Empfehlung
- Fuellen Sie nur Wasser oder empfohlte Fluessigkeiten ins Wasserreservoir
- Legen Sie keinen Fremdkoerper in jede Oeffnung oder Weichleitung.
- Beim Benutzen tragen Sie keine Zahndekoration und Nasedekoration. Bitten ziehen Sie sie ab vor dem Benutzen.
- Wenn die Arzte oder Herzarzt Sie vorschlagen, vor dem Benutzen Antibiotikum zu nehmen, sollen Sie vor dem Benutzen Ihren Zahnarzt fragen.
- Vergessen Sie nicht obene Hinweise

FEATURES

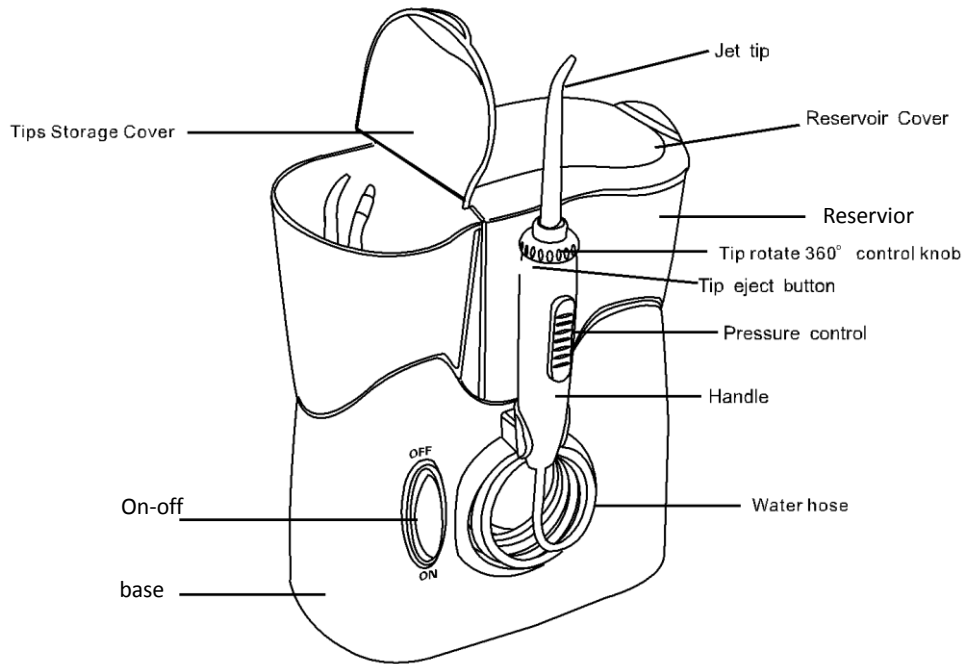

Produktvorstellung

Tip storage cover: Duesespeicherkasten

On-off: Schalter

Base: Konsole

Jet tip: Duese

Reservoir cover: Abdeckung des Wasserreservoir

Reservoir (800ML) : Wasserreservoir

Tip rotate 360° control knob: Wasserrichtungsdrehknopf

Tip eject button: Duesespritzknopf


Pressure control: Druckkontrollknopf

Handle: Handgriff


Water hose: Wasserleitung



Tongue
Cleaner
Tip

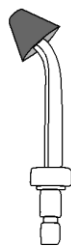

Standard Nasal
Irrigation Tip

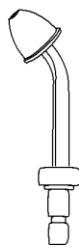

Moisturizing
Mist Spray
Nasal Tip



Orthodontic
Tip



Periodontal
Tip




Jet Tip

Tongue cleaner tip: Zungereinigung
 Standard nasal irrigation tip: Naseduese mit Wassersaeule
 Moisturizing mist spray nasal tip: Naseduese mit Spritzen
 Orthodontic tip: orthodontische Duese
 Periodontal tip: peridentale Duese
 Jet tip: Standardduese

Plug this device into voltage system that is specified on the device. If the outlet is controlled by a wall switch, be sure it is turned on.


Tip Storage

The tip storage comes with two movable tips dividers. The holding capacity of tips is enlarged by removing the dividers. Max: 20 tips.

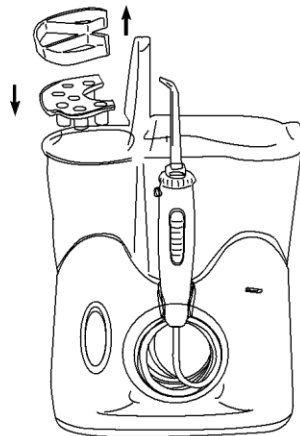

Preparing the Reservoir

Open the reservoir cover. Lift off the water reservoir from the base and fill with lukewarm water. Place the reservoir securely over the base and press down firmly. Put down the reservoir cover.

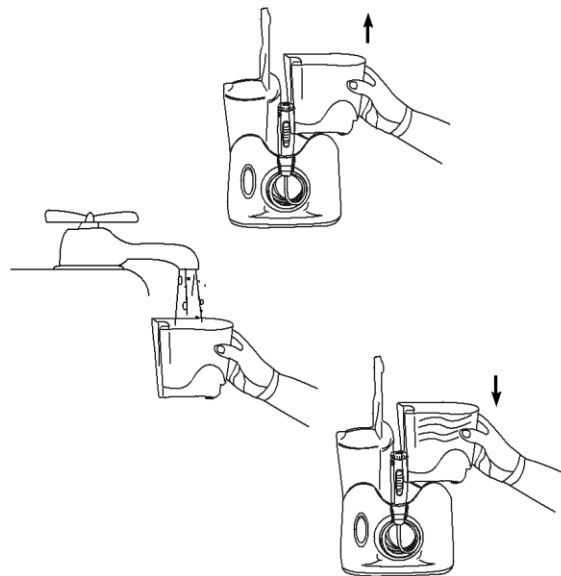

Wie benutzt man


Stecken Sie die Kabel in die Steckdose.

Duesespeicherkasten

Im Kasten gibt es 2 mobile Duesesteckdose und Verteiler. Duesesteckdose macht Duese ordentlicher. Verteiler lasst die Familie das eigene Duesebereich trennen. Sie koennen auch die Duesesteckdose und Verteiler nicht benutzen, damit koennen Sie mehr Duese platzieren.

Vorbereitung mit Wasserreservoir

Oeffnen Sie die Abdeckung und nehmen Sie das Wasserreservoir heraus. Fuellen Sie mit Wasser und legen Sie auf die Konsole. Druucken Sie mit Kraft nach unten und legen Sie Abdeckung

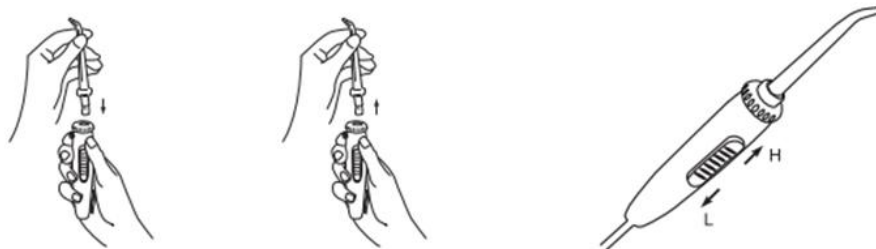


Einstecken und Abziehen der Duese

Stecken Sie Duese in den Handgriff. Wenn die Duese befestigt wird ist buter Ring buendig zum Knopfende des Handgriff. Druucken Sie Spritzknopf, um Duese herauszunehmen.

Druckeinstellung

Gleiten Sie die Drucktaste nach oben und nach unten, um Wasserdruck einzustellen. Schieben Sie nach der Dueserichtung, um Druck zu erhoehen. Schieben Sie nach der Wasserleitungsrichtung, um Druck zu reduzieren.

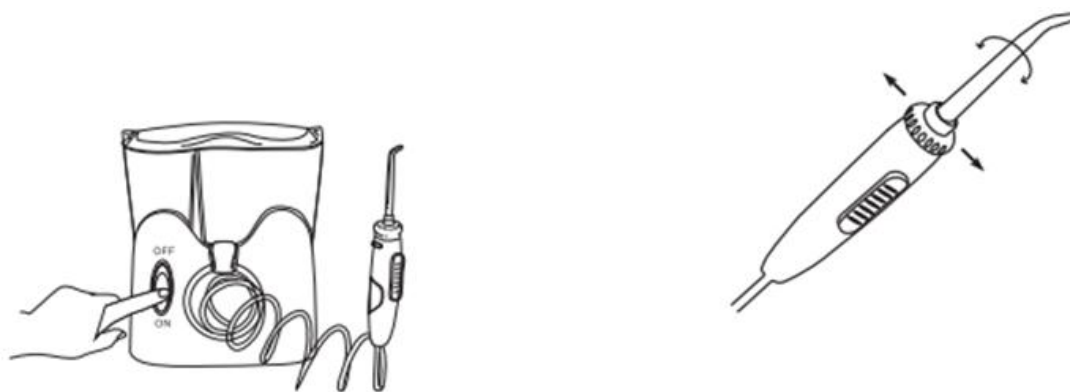

In den Mund einlegen

Stehen sie vor dem Waschtisch und legen Sie Duese in den Mund und positionieren Sie sie zu Ihre Zaehne. Machen Sie mit der anderen Hand den Schalter auf Konsole auf. Gleiten Sie die Drucktaste, um Wasserdruck einzustellen.

Drehen Sie den Knopf oben der Handgriff, um Wasserrichtung zu kontrollieren



Empfohlte Technik

Das Wasser hat 90 Grad Winkel mit Zahnfleischlinie. Schliessen Sie den Mund oder mindestens den halben Mund, um Wasserspritzen zu vermeiden. Wasser aus dem Mund soll frei auf den Waschtisch fließen wie Zahnputzen. Am besten reinigen Sie von hinten nach vorne. Duesekopf bewegt entlang der Zahnfleischlinie und bleiben kurzfristig inzwischen die Zaehne. Wenn Sie die umgebung von Zahnfleisch und zwischen die Zaehne fertig sauber machen, ist die Reinigung zum Ende.

Nach der Reinigung

Machen Sie den Schalter zu und reinigen Sie die restliche Flüssigkeit im Wasserreservoir. Ziehen Sie den Stecker heraus.



Spezielle Duese


peridentale Duese

Mit der peridentalen Duese koennen Sie das Wasser in die Zaehne und in die Stelle, wo schwer zu beruehren, fuellen, um zu reinigen. Die peridentale Duese kann das Antiseptikum in die Entzuendungsstelle bringen. Bitte benutzen Sie das Antiseptikum unter dem Arztvorschlag.

Stehen Sie vor dem Wassertisch und legen Sie die Weichduese mit einem Winkel von 45 Grad mit den Zaehne. Legen Sie die Duese sanft in die Alveole unten den Zahnfleisch. Schalten Sie die Anlage ein und stellen Sie den Druck auf minimum, legen Sie die Duese sanft zwischen die Zaehne und reinigen Sie nach der Zahnfleischrichtung.

Zungereinigung



Stehen Sie vor dem Wassertisch und legen Sie die Zungereinigung oben auf der Zunge. Schalten Sie ein- zuerst mit dem niedrigsten Druck und dann erhoehen Sie den Druck komfortable. Legen Sie die Zungereinigung sanft in der Mitte der hinteren Zunge und ziehen Sie sanft nach vorne

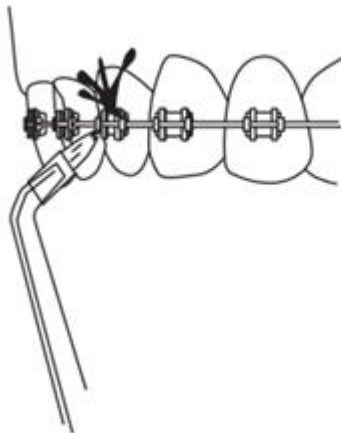

Orthodontische Duese

Mit der orthodontischen Duese koennen Sie den Zahnklammer und andere schwer beruehrten Stelle reinigen.

Reinigen Sie mit der orthodontischen Duese die Spalt zwischen dem Zahnklammer und spritzen Sie mit Wasser.

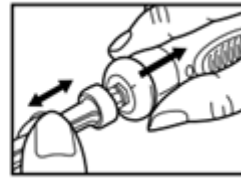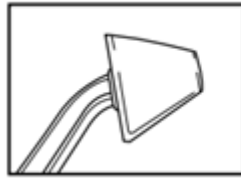

Nasereinigung

Achtung:

1. Mit der Nasekrankheit muessen Sie zuerst den Arzt befragen vor der Verwendung
2. Wenn beide Nasenhoehle zugestopft werden duerfen Sie nicht verwenden
3. Kinder duerfen nur unten Supervisor von der Eltern die Funktion benutzen.
4. Vor der Verwendung ziehen Sie die Nasedekoration ab
Benutzen Sie sanft, ohne Gewalt zu haben
5. Benutzen Sie Nasemedikamente nicht uebermaessig
6. Zu trockene Luft und Sandsturm sind schlimm fuer Ihre Nase. Vor dem Einschlaf ist notwendig, die Nase zu reinigen.
7. Benutzen Sie keine fremde Ersatzteile
8. Benutzen Sie die Einrichtung nicht auf andere Organe.

Schritt:

1. Montieren Sie die Naseduese auf den Handgriff der Munddusch und stellen Sie den Wasserdruck auf minimum.
2. Setzen Sie warmes Wasser ins Wasserreservoir. Fuer Nasereinigung brauchen Sie Salz und Natriumhydrogenkarbonat im richtigen Mass: 1000 ml warmes Wasser+7g Salz+3g Natriumhydrogenkarbonat. Sie koennen auch 10 g Salz ohne Natriumhydrogenkarbonat. Der Grund ist, dass die Fluessigkeit in der Nase aehnlich wie Salzwasser ist, deshalb fuehlen Sie bequem mit Salzwasser.
3. Stellen Sie Handgriffknopf auf minimum und setzen Sie die Naseduese nach oben, schalten Sie ein und die Wassersaeule soll nicht 25 mm hoeher als Duese sein.
4. Schalten Sie aus und verstopfen Sie mit eine Seite der Nase. Setzen Sie den Kopf nach unten und oeffnen Sie den Mund. Atmen Sie durch Mund. Zum ersten Mal sollen Sie das niedrigste Niveau. Wenn Sie daran gewoehnen koennen Sie allmaehlich zusetzen bis max.
5. Machen Sie auf und lassen Sie die Salzfluessigkeit in ein Nasenloch und lassen Sie sie von dem anderen Loch fliessen.

6. Beim Reinigen schlurfen Sie nicht bis die saubere Flüssigkeit aus der Nase kommt
7. Wenn es nur halbe Volume im Wasserreservoir steht setzen Sie auf niedrigstes Niveau und verstopfen Sie die Düse das andere Naseloch und wiederholen Sie das Prozess
8. Setzen Sie den Wasserdruck auf Max.. Reinigen Sie das Salz mit Wasser in der Anlage.
9. Nach dem Reinigen neigen Sie den Kopf seitlich nach einer Seite und atmen Sie durch Naseloch. Dann neigen Sie den Kopf seitlich nach der anderen Seite und wiederholen Sie noch mal das Prozess. Machen Sie den Kopf nach unten und atmen Sie. Damit kommt alle Flüssigkeit in der Nase heraus. Die Konstruktion im Naseloch ist kompliziert, nach dem Reinigen wird vielleicht in ein paar Stunde die Flüssigkeit aus der Nase kommt.

Vorteil:

1. Impulsreinigung kann effektiv die Schleim und Sekretion in der Nase beseitigen, das hilft uns gegen Virus und Allergie, ausserdem ist gut gegen Schnupfen und Nasennebenhöhlenentzündung.
2. Das kann Nasehaare in Ordnung bringen.
3. Nasereinigung lässt die Leute, die viel rauchen und trinken, frei atmen.

Wartung

Putzen Sie mit Weichtuch und schadlose Reinigungsmittel das Produkt und vor dem Putzen ziehen Sie den Stecker aus Steckdose heraus.

Nehmen Sie das Wasserreservoir heraus und fahren Sie die Anlage bis keine Rückstand mehr

Sie dürfen keine Elektrikomponente selbst reparieren und keine Wartung ist nötig. Reparatur darf nur bei uns oder beauftragte Servicezentrum übernommen werden. Ersatzteile können Sie die lokale Agentur befragen oder rufen Sie uns direkt an.

Stoerungbehebung

Problem	Ursache	Loesung
Zwischen Duesekopf und Handgriffknopf ist undicht	Duesekopf ist nicht komplett verzahnt	Ziehen Sie den Duesekopf ab und montieren Sie wieder
Der weiche Kleber auf peridentale Duese platzt auf	Duesekopf ist stark beschaedigt	Tauschen Sie den neuen Kopf
Der Schlauch zwischen Konsole und Handgriff ist undicht	Der Schlach ist kaputt	Rufen Sie uns oder Agentur an, um den Schlauch zu tauschen
Wasserreservoir ist undicht	Das Ventil wird nicht eingebaut oder Sie haben das Ventil umgekehrt eingebaut. (Die Frontseite ist nach unten)	Bauen Sie das Ventil ein
Druck ist nicht genug	Wasserreservoir wird nicht in die richtige Position eingebaut	Montieren Sie das Wasserreservoir noch einmal und druecken Sie mit Kraft
Die Anlage kann nicht gestartet werden	Motor laeuft nicht	Stellen Sie sicher, dass das Ausgang richtig arbeiten kann. Testen Sie mit anderer Anlage. (Kontrollieren Sie dei Quitierungsknopf oder Schalter auf der Wand)

Kundendienst

Seien Sie vorsichtig mit folgenden Kundendienstvorgaben:

1. Nach dem Beschaffen innerhalb 7 Tage können Sie gratis das Produkt zurückgeben.
2. Nach dem Beschaffen innerhalb 1 Monat mit der Qualitätsprobleme können Sie gratis ein neues Produkt tauschen.
3. Nach dem Beschaffen innerhalb 2 Jahre können Sie umsonst reparieren lassen und die Transportkosten bezahlen wir.
4. Nach dem Beschaffen länger als 2 Jahre können wir auch umsonst reparieren, aber die Transportkosten bezahlen Sie.

Menschliche Schäden, falsche Benutzung, übermäßige Verwendung und Schleissteile wie Düse und Bürste sind nicht inklusiv..

Oben genannte Punkte gelten nur im Inland China. In anderen Staaten oder Zone haben Sie unterschiedliche Rechte nach dem Gesetz

h2ofloss

Hersteller: Shenzhen Baofengtong Elektrogeraet GmbH.
hergestellt in China
ausgedruckt in China

[Http://www.h2ofloss.net](http://www.h2ofloss.net)
[Http://www.h2ofloss.com](http://www.h2ofloss.com)

Any questions, please contact Email: janet.lai@hotmail.com