


Manuale d'uso

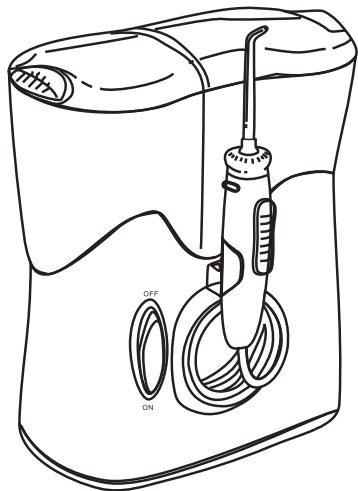

h2ofloss

Irrigatore dentale (idropulsore orale)
Modello: hf-8 tipo silenzioso

Importante

Si prega di vedere il
manuale e conservarlo
per un riferimento

Prefazione



Grazie per aver scelto h2ofloss irrigatore dentale (idropulsore orale)

Questo prodotto utilizza le diverse tecniche incluse la pressione dell'acqua e l'impulso

L'uso di questo prodotto può togliere efficacemente i residui di cibo e batteri nocivi tra i denti e sotto le gengive

L'uso di questo prodotto può togliere efficacemente i rifiuti, i virus dannosi e la materia allergica tra la cavità nasale e la sinusale

Si prega di leggere questo manuale per un metodo dell'uso più dettagliato

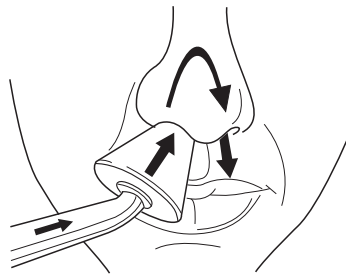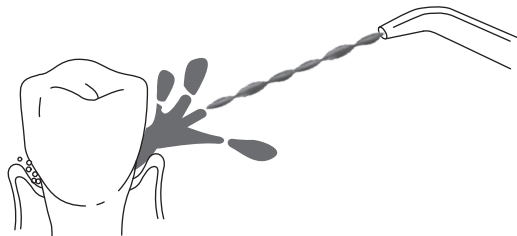

Misure di sicurezza	4-5
Descrizione del prodotto	6-7
Come utilizzare	8-15
Manutenzione del prodotto	16
Risoluzione dei problemi	17
Servizio dopo la vendita	18

Misure di sicurezza.

Quando si usa i prodotti elettrici, si prega di essere sicuri di prendere le seguenti precauzioni di sicurezza basale, in particolare in presenza dei bambini.

Si prega di vedere tutti gli istruzioni

Pericolo:

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, si prega di notare le seguenti:

Si prega di staccare la spina di alimentazione del prodotto dopo l'uso

Non staccare la spina con le mani bagnate

Non mettere o conservare il prodotto nel posto dove è possibile cadere o è tirato probabilmente nella vasca, nella doccia o nel bagno

Non usarlo quando fa la doccia

Non metterlo nell'acqua o negli altri liquidi

Se il prodotto è caduto nell'acqua, si prega di staccare subito la spina e non toccarlo.

Sia che per la prima volta, prima di utilizzare il prodotto sia che durante l'utilizzo di questo prodotto, si prega di controllare se il cavo di alimentazione è danneggiato

Avvertimento:

Per ridurre il rischio di ustione, folgorazione, incendio o danno del tessuto fisico, si prega di notare le seguenti:

Non utilizzare questo prodotto nei seguenti casi: il cavo di alimentazione o la spina è danneggiato/a, il prodotto non funziona bene, il prodotto è rotto o è caduto in qualsiasi liquido.

Nel tal caso, il prodotto deve essere restituito all'autorizzazione centrale o alla nostra società

Quando i bambini e le persone con l'esigenze particolari utilizzano questo prodotto, è necessario dargli una supervisione

Tenere il cavo lontano dalle superfici riscaldate.

Non utilizzare questo prodotto quando si usa anche l'ossigeno o lo spruzzo di aerosol

Non utilizzarlo nell'aria aperta

Attenzione quando si usa questo prodotto:

Non iniettare l'acqua sotto la lingua, le orecchie, il naso o altre parti sensibili. La pressione che è portato dal prodotto può causare i gravi danni a queste parti. Si prega di seguire le istruzioni operative per un uso corretto.

Solo utilizzare questo prodotto secondo le istruzioni suddette o il consiglio del dentista.

Non superano 8 minuti in ogni due ore quando si usa questo prodotto.

Utilizzare solo gli accessori consigliati (inclusi la testa a getto, la testa a getto parodontale, la raschiatura della lingua, l'ugello doppio, la testa per lavare il naso, l'ugello speciale ortodontico).

Non smontare la testa di gomma elastica dall'albero trasparente della tasca dentale. Se la testa di gomma è sciolta per qualsiasi motivo, si prega di scartare la testa di gomma elastica e l'albero trasparente e sostituirli con il nuovo ugello della tasca parodontale.

Si può iniettare solo l'acqua o altri liquidi consigliati nel serbatoio d'acqua.

Non mettere o inserire l'oggetto estraneo nelle aperture o il tubo flessibile.


Non indossare l'ornamento per i denti durante l'uso. Se si indossa l'ornamento per i denti, si prega di toglierlo prima dell'uso.

Non utilizzarlo se c'è il trauma della lingua.

Se il medico o il cardiologo consiglia di prendere gli antibiotici durante il trattamento dentale, si prega di consultare il dentista prima di utilizzare questo prodotto o qualsiasi altro apparecchio di igiene orale.


Sempre tenere a mente le istruzioni suddetti

Descrizione del prodotto:

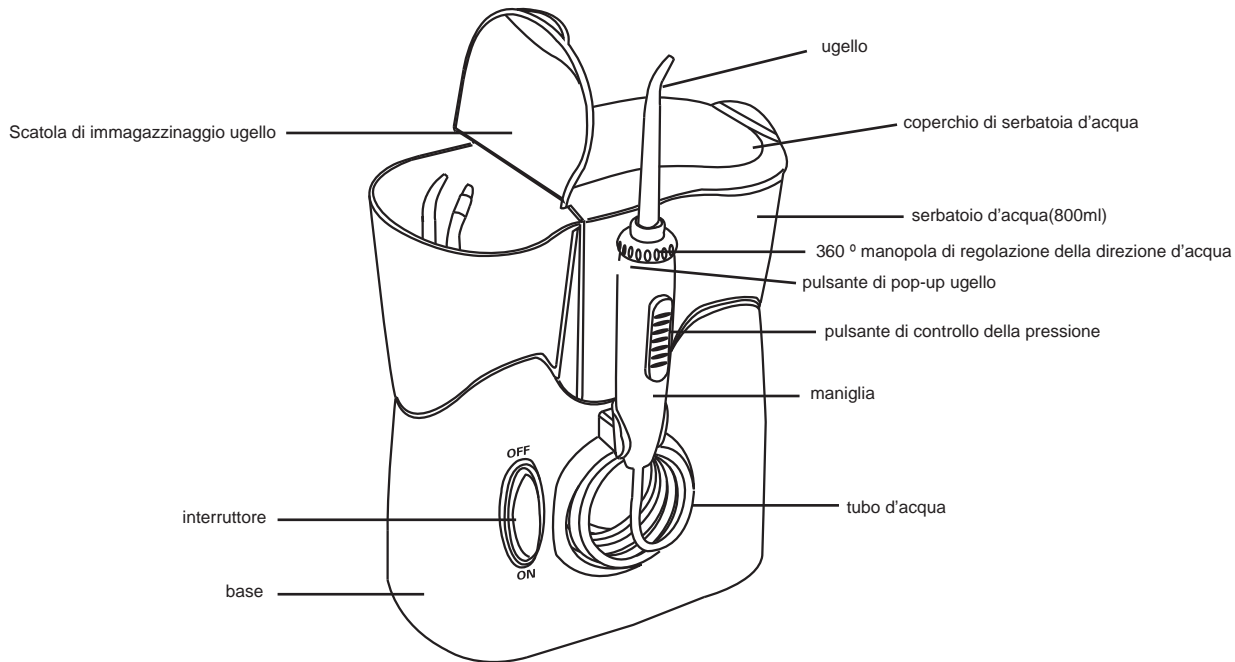





raschiatura
della lingua

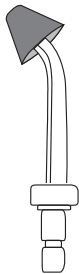

ugello di lavaggio
nasale di colonna
d'acqua

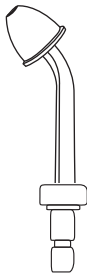

Ugello di
lavaggio nasale
a spruzzo

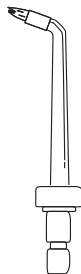

Speciale ugello
ortodontico



Ugello delle
tasca parodontale




ugello standard

Come utilizzare

Inserire il filo elettrico nella presa di corrente elettrica, se la presa di corrente è controllata da un interruttore a muro, si prega di assicurarsi che l'interruttore a muro è aperto.


Scatola di immagazzinaggio ugello

Nella Scatola di immagazzinaggio ugello, ci sono una mobile presa di corrente del ugello e una mobile rastrelliera stratificata. La presa di corrente del ugello può ordinare gli ugelli, la rastrelliera stratificata d'ugello permette alle famiglie di distinguere la propria area dell'ugello. Gli utenti non possono anche utilizzarli per conservare più ugelli.

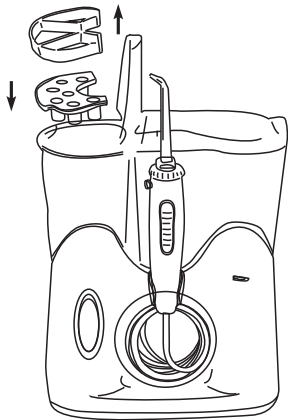


Preparare il serbatoio di acqua

Aprire il coperchio del serbatoio, prendere il serbatoio dell'acqua e riempire il serbatoio con l'acqua. Mettere il serbatoio sulla base, premere forte. Mettere giù il coperchio del serbatoio.

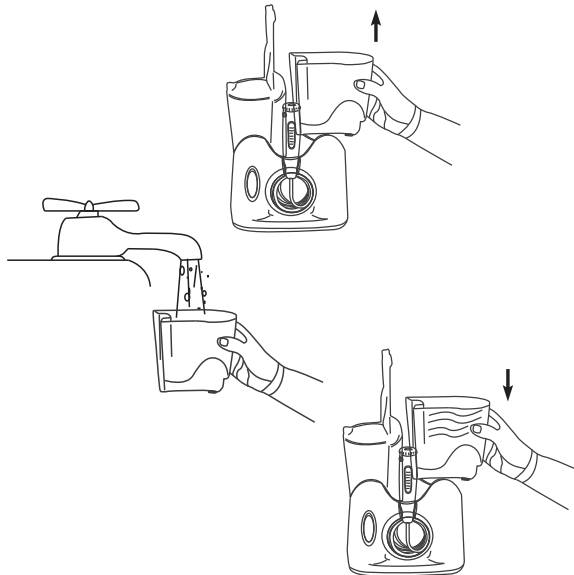


Inserimento e rimozione dell'ugello

Inserire la maniglia nell'ugello, quando l'ugello è fisso, l'anello colorato dell'ugello deve essere a filo con l'estremità della manopola della maniglia. Premere il pulsante pop-up dell'ugello e prendere fuori l'ugello.

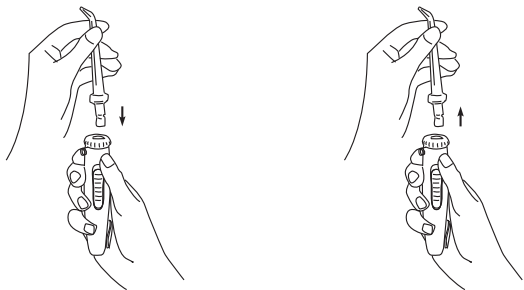


Regolare le impostazioni di pressione

Scorrere su e giù il tasto di controllo della pressione sulla maniglia può controllare la dimensione della pressione dell'acqua. Quando è verso l'ugello, fortifica la pressione dell'acqua. Quando è verso il tubo dell'acqua, la pressione dell'acqua indebolisce.

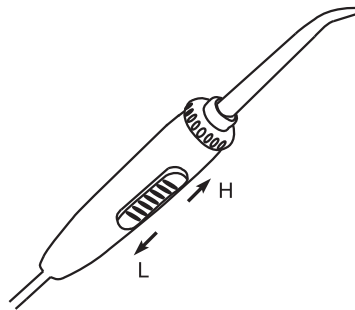


Inserire in bocca

Chinarsi sopra il lavandino, inserire l'ugello nella bocca verso i denti. Aprire l'interruttore sulla base con l'altra mano. Scorrere il tasto di controllo della pressione sulla maniglia per regolare la pressione dell'acqua.

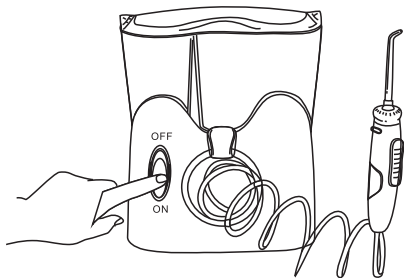


Rotare il pulsante della maniglia superiore per controllare la direzione del flusso dell'acqua.

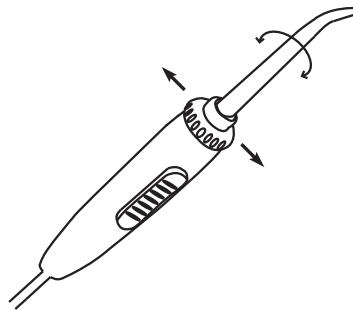

La tecnologia consigliata

Mettere il flusso dell'acqua con il bordo gengivale a un angolo di 90 gradi, tenere la labbra chiusa o semiaperta per non schizzare fuori l'acqua e per fare l'acqua nella bocca fluire liberamente nel serbatoio (come uno spazzolino da denti). Per ottenere un risultato ottimo, si prega di pulire da molari (denti posteriori) verso i denti incisive. Scorrere la testa di iniezione lungo il bordo gengivale e fare un breve soggiorno tra i denti, fino a quando tutto è pulito tra i denti e tra le gengive circostanti.

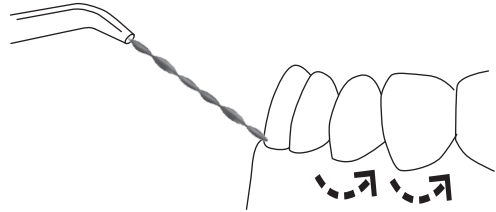

Completamento


Chiudere l'interruttore, drenare il liquido rimanente nel serbatoio e staccare la spina di alimentazione.

Ugello specializzato

Ugello della tasca parodontale

L'ugello della tasca parodontale può iniettare l'acqua fra i denti e le aree difficili da raggiungere. Può anche iniettare il liquido antibatterico all'interno di parodontite, si prega di usare il liquido antibatterico consigliato dal medico.

Quando si usa l'ugello della tasca parodontale, si prega di chinarsi sopra il lavandino, mettere l'ugello morbido contro i denti a un angolo di 45 gradi e poi mettere leggermente l'ugello nell'alveolo dentario sotto il bordo gengivale, aprire il dispositivo impostando la pressione al livello più basso, mettere leggermente l'ugello sui denti e pulire lungo la direzione del bordo gengivale, e continuare a muovere lungo il bordo gengivale.

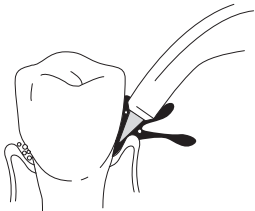


Raschiatura della lingua

Chinarsi sopra lavandino, mettere la raschiatura della lingua sulla lingua, quindi avviare la macchina, dapprima utilizzare la pressione più bassa, allora fortificare la pressione in funzione del livello di comodo, mettere leggermente la raschiatura della lingua sul centro della seconda metà della lingua, quindi tirarlo leggermente in avanti contro la lingua.



Speciale ugello ortodontico

Pulire e risciacquare gli apparecchi ortodontici e le aree difficili da raggiungere con lo speciale ugello ortodontico. Durante il tempo dell'uso, pulire l'apparecchio ortodontico e la aree tra l'apparecchio e i denti con lo speciale ugello ortodontico, gettando il flusso dell'acqua.

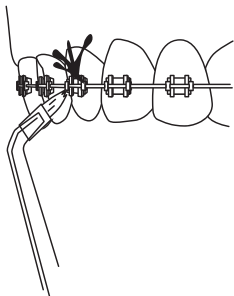




Sistema d'irrigazione nasale fare ricordare

1. Prima di utilizzare il dispositivo di lavaggio nasale , i pazienti con la rinite grave devono consultare il medico.
2. Proibire di utilizzare questo prodotto se entrambi i lati della cavità nasale sono completamente bloccati.
3. I bambini devono usarlo solo sotto la supervisione dei genitori.
4. Si prega di rimuovere i gioielli nasali prima di utilizzarlo.
5. Non usarlo a viva forza. L'azione dovrebbe essere leggera.
6. Non usare la pozione nasale eccessivamente.
7. Sono sfavorevoli la secchezza eccessiva d'aria e la tempesta di sabbia per la cavità nasale, è necessario lavare la cavità nasale prima di andare al letto.
8. Non utilizzare gli altri accessori eccetto i prodotti della nostra società.
9. Non usare questo dispositivo nelle altre parti del corpo.

Passi:

1. Installare l'ugello del lavaggio nasale sulla maniglia del getto d'acqua di h20floss irrigatore nasale e orale, e regolare la pressione dell'acqua al minimo.
2. Inserire l'acqua calda nel serbatoio e aggiungere un po' di sale e di bicarbonato di sodio nell'acqua di lavaggio nasale. Rapporto di soluzione dell'acqua temperata: 1000ml acqua temperata + 7 g di sale fino + 3g di bicarbonato di sodio. Va bene anche con 10g di sale senza il bicarbonato di sodio. Lo scopo dell'uso di acqua salina è quello che la soluzione nel naso è molto simile alla soluzione salina, è più comodo utilizzare la soluzione salina per la cavità nasale.
3. Regolare la manopola della maniglia alla marcia più bassa, aprire l'interruttore e mettere l'ugello di lavaggio nasale in su, tenere la colonna d'acqua non supera l'ugello a circa 1 pollice (25mm).
4. Spegnere Chiudere l'interruttore, bloccare leggermente un lato della narice con l'ugello di lavaggio nasale, chinando la testa. Mentre aprire la bocca, respirare con la bocca. Per la persona che utilizza questo prodotto in prima volta, è più adatta la marcia bassa, e poi aumentare gradualmente fino alla massima.

5. Aprire l'interruttore, la soluzione salina entra in un lato del naso, ed esce dall'altra narice.
6. Non ingoiare quando lavare la narice, fino al flusso del liquido pulito.
7. Regolare la marcia a più bassa quando l'acqua nel serbatoio è rimasta circa la metà, bloccando un'altro lato della narice con l'ugello di lavaggio nasale, ripetere di nuovo e risciacquare.
8. Regolare la pressione d'acqua al massima e togliere la salata con l'acqua pulita.
9. Dopo il lavaggio nasale, girare la testa al lato, mentre respirare con la narice, poi girare la testa al lato opposto e fare la stessa azione. Poi chinarsi la testa, rirespirare. Lo scopo è fare effluire fuori la soluzione del lavaggio nasale rimasta ancora nella narice. Perché la struttura all'interno delle narici è molto complessa, rimanere qualche soluzione nella cavità nasale dopo il lavaggio. Nel giro di poche ore, se effluire anche la soluzione, è un fenomeno normale, quindi non preoccuparsi.

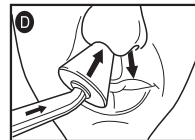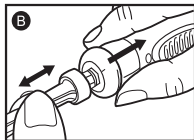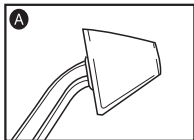

Vantaggi:

1. Lavaggio d'impulso può essere molto efficace per rimuovere i muco e le secrezioni all'interno della cavità nasale, essere molto utile per rimuovere tutti i tipi di virus del raffreddore e le allergie, anche ha un buon effetto per il muco nasale e la sinusite.
2. Irrigare la cavità nasale può anche promuovere i capelli del naso a tornare alla normalità.
3. Irrigare la cavità nasale può dare le persone che fumano e bevono troppo una respirazione senza ostacolo.

Quando ha bisogno di pulire il prodotto, si prega di pulirlo con un panno morbido e il detersivo senza usura, e prima di pulirlo, si prega di staccare la spina dalla presa di corrente.

Rimuovere il serbatoio dell'acqua, e quindi funzionare la macchina fino a quando non ci sono i residui.

Gli utenti non possono mantenere qualsiasi componente elettronico del prodotto, anche senza qualsiasi manutenzione ordinaria, i lavori di riparazione per il prodotto solo possono essere eseguiti dalla nostra società o dall'autorizzazione centrale. Potere contattare direttamente l'agenzia locale o la nostra società per un ugello sostituibile/allegato.

Problema	Causa	Soluzione
Trapela tra l' ugello e la manopola della maniglia	L' ugello non innesta bene con la maniglia	Rimuovere l' ugello e installarlo di nuovo
L' ugello morbido della tasca parodontale è screpolato	L' ugello ha una grave usura	Cambiare un nuovo ugello
Trapela il tubo flessibile tra la base e la maniglia	Il tubo flessibile è danneggiato	Si prega di contattare la nostra società o l' agenzia per sostituirlo
Trapela il serbatoio	Non installare la valvola del serbatoio, o la valvola è installato incorrettamente (la faccia è in giù)	Installare la valvola del serbatoio, e mettere la faccia della valvola in su
La pressione è insufficiente	Il posto del serbatoio non è corretto	Reinstallare il serbatoio e premere il serbatoio a forza
Non può avviare il dispositivo	Non funziona il motore	Grantire che l' uscita può funzionare, e provare con gli altri apparecchi (controllare il pulsante di azzeramento elettrico e/o l' interruttore a muro)

